



DESECADORES | Tipo Gabinete

Posición Horizontal Y Vertical | Termohigrómetro Análogo y Digital

Ideales para almacenar reactivos químicos y demás muestras que requieran ser protegidas de la humedad.

- Gabinete de posición horizontal y vertical
- Ensambladas en acrílico transparente para observar desde cualquier ángulo
- Puerta reforzada con marco en acero Inoxidable para selle hermético
- Empaque siliconado de gran resistencia química y de difícil deformación, para garantizar sellado hermético.
- TermoHigrómetro análogo o digital, para verificación de los niveles de humedad relativa.
- Humedad relativa, alcanza una humedad inferior o igual al 30%.



Otras Características



- Equipados con bandejas provistas agujeros de ventilación lo cual permite una atmósfera homogénea.
- Ajuste variable de altura de las bandejas
- Bandeja exclusiva como depósito para el material desecante (Sílica gel).
- Incluye material desecante (Sílica gel con indicador de humedad)
- Uso únicamente a temperatura ambiente y presión normal.
- Patas de caucho anti-deslizantes



Información Y Ventas
311 542 0236

Datos Técnicos

Modelo	DH-1001	DH-1002	DV-1003	DV-1004	
Posición de cabina	Horizontal		Vertical		
Condiciones de trabajo	Temperatura	Para uso a temperatura ambiente únicamente			
	Presión atmosférica	Normal (NO apta para vacío)			
Indicador de humedad	Termo higrómetro	Análogo	Digital	Análogo	Digital
Humedad relativa mínima		Humedad relativa \leq 25%			
Dimensiones a*f*h (cm)	Internas	38*30*28		38*30*53	
	Externas	40*32*30		40*32*55	
Material de construcción	Interno/Externo	Acrílico Transparente			
	Selle puerta	Marco en Acero Inoxidable 304 - Cuacho tipo espuma siliconado			
Soportes	Bandeja para material desecante	Si			
	Tipo	Bandeja acrílica con perforaciones			
	N° de bandejas incluidas	2		3	
	Altura ajustable	40 mm mínimo entre bandejas			
	N° máximo de bandejas	7		12	

Especificaciones técnicas sujetas a cambio sin previo aviso

* Opcional se puede entregar el termohigrómetro con certificado de calibración


¿No se ajustan a sus requerimientos?

Ofrecemos soluciones hechas a medida del cliente según sus necesidades y especificaciones.

Consúltenos y lo asesoramos.



Ideales para aprovechar la máxima capacidad de cada desecador

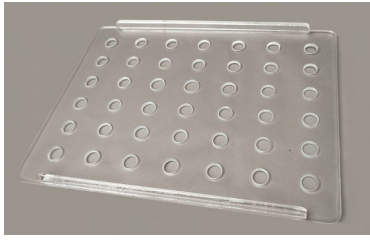

Bandeja con orificios de ventilación

Modelo	BD-1001
Dimensiones	37*28 cm
Material	Acrílico transparente
Orificios de ventilación	Si



Bandeja para material desecante

Modelo	BD-1002
Dimensiones	37*28
Material	Acrílico transparente
Para material desecante	Si



Material desecante o sílica gel con indicador de humedad

Modelo	SG-0500	SG-1000
Presentación	500 Gr.	1000 Gr.



Termohigrómetro Digital

Modelo		231160000290
Presentación		Digital
Función		Min. /Máx. . Reset
Resolución	Temperatura	1°C
	Humedad	1%
Rango	Temperatura	0°C – 50°C
	Humedad	10% - 98%



Termohigrómetro Análogo

Modelo		231160000306
Presentación		Dial 3-1/2" Análogo
Resolución	Temperatura	1°C
	Humedad	1%
Rango	Temperatura	-30°C – 60°C
	Humedad	0% - 98%